


血液透析管理系统安装指南

- 1、本系统分为 32 位及 64 位版本，本系统提供 32 版，其中 xp 版可用于所有操作系统，win7 版仅适合 win7 以上版本。其速度是 $xp < win7 < 64$ 位版，需要其它版本的用户请查看相关下载。所有服务器均需微软 VC 支持。
- 2、64 位系统限定安装在 WIN7 以上操作系统中（win2003 未测试），32 位系统可随意选择操作系统，但仍建议安装在 win7 以上操作系统。
- 3、本系统工作于局域网中，一般单位已经组网，可选择其中任何一台电脑作为服务器，也可以部署在服务器端（本系统采用 mysql 服务器，如果与单位服务器相同，注意把端口号分开设置即可）
- 4、若选用局域网中电脑做服务器，其 IP 地址一定要手工固定，其具体操作如下：
右键打开网络属性
查看更改适配器设置
先查看适配器详细信息



查看现在的 IP 地址

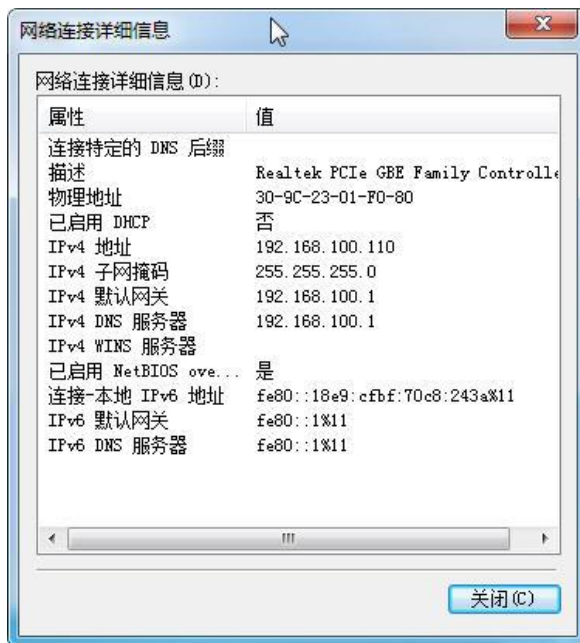


打开本地连接属性




选

择 TCP/IP 查看属性

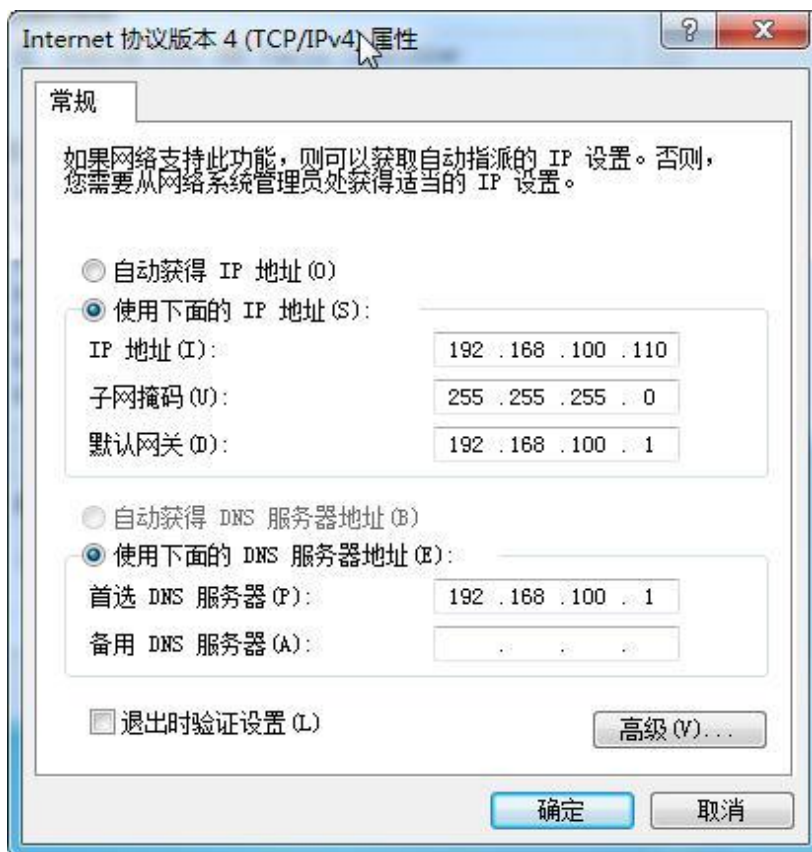

选择“使用下面 IP 地址”填入刚刚看到的 IP 地址。确定即可。、

- 5、将服务器文件安装入 C 盘之外的合适大小的盘中。其盘中剩余空间至少 4G 以上。
- 6、如果希望开机自动启动，可将桌面快捷方式其拷入启动菜单中。
- 7、系统安装完毕后会启动设置程序，在这个程序里先运行 **启动数据库** 程序初始数据库。，启动中系统防火墙会提示是否允许访问网络，应选择允许。

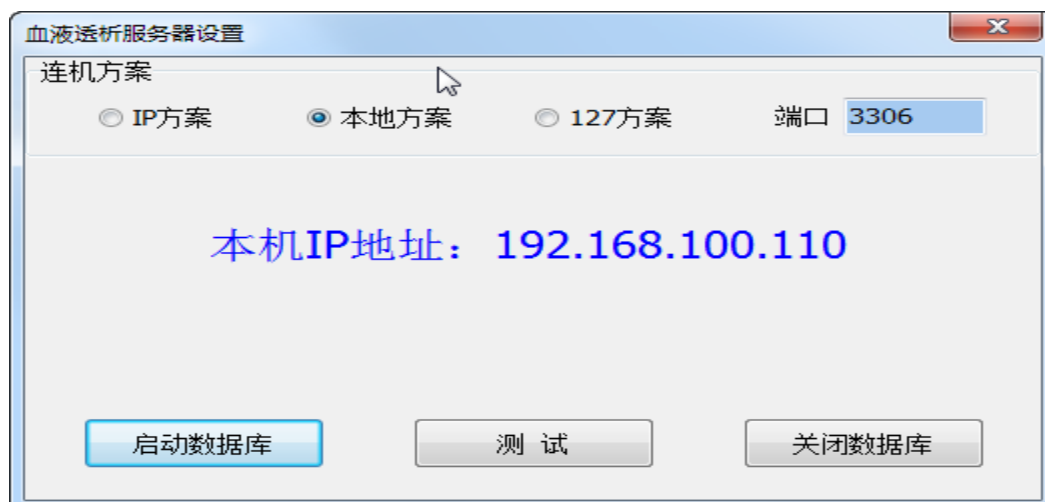

- 8、选择关闭数据库后，可选择启动 server 文件。初次运行可能报错，可在任务管理器中关闭 mysql.exe



关闭 server.exe 后再次运行 server 程序。



9、服务器启动后，托盘中服务器图标，右键可进入相应菜单中，设置栏中可设置医院名

称及透析室名，端口也可自行设置，如果与单位无冲突，建议不要修改。

- 10、 若端口修改过，需重启服务器使其生效。
- 11、 客户端到相应机器上安装，安装完成后需先行进行设置程序，在其服务器 IP 地址中填入服务器电脑的 IP 地址。
- 12、 在服务器电脑上安装客户端不用设置即可运行相应客户端。
- 13、 系统预装有各客户端管理员成员一人，其中各登录名是：
服务器：fxcj
透析医生站 fxys
透析护士站 fxhs
透析体重
排班中 急诊组：fxjz
患者组：fxhz
透析医生组：fxys
透析护士组：fxhs
肾病内科医生组：fx1
肾病内科护士组：fx2
交班系统：fx1 或 fx2
护理表格：fx1 或 fx2
密码均为空。
- 14、在透析医生站或护士站中打开[关于菜单](#)，可见到二维码，用手机（需连接于本网络）扫描二维码下载安装程序安装手机程序。